


RyseUp Wearable

Başlangıç Kılavuzu

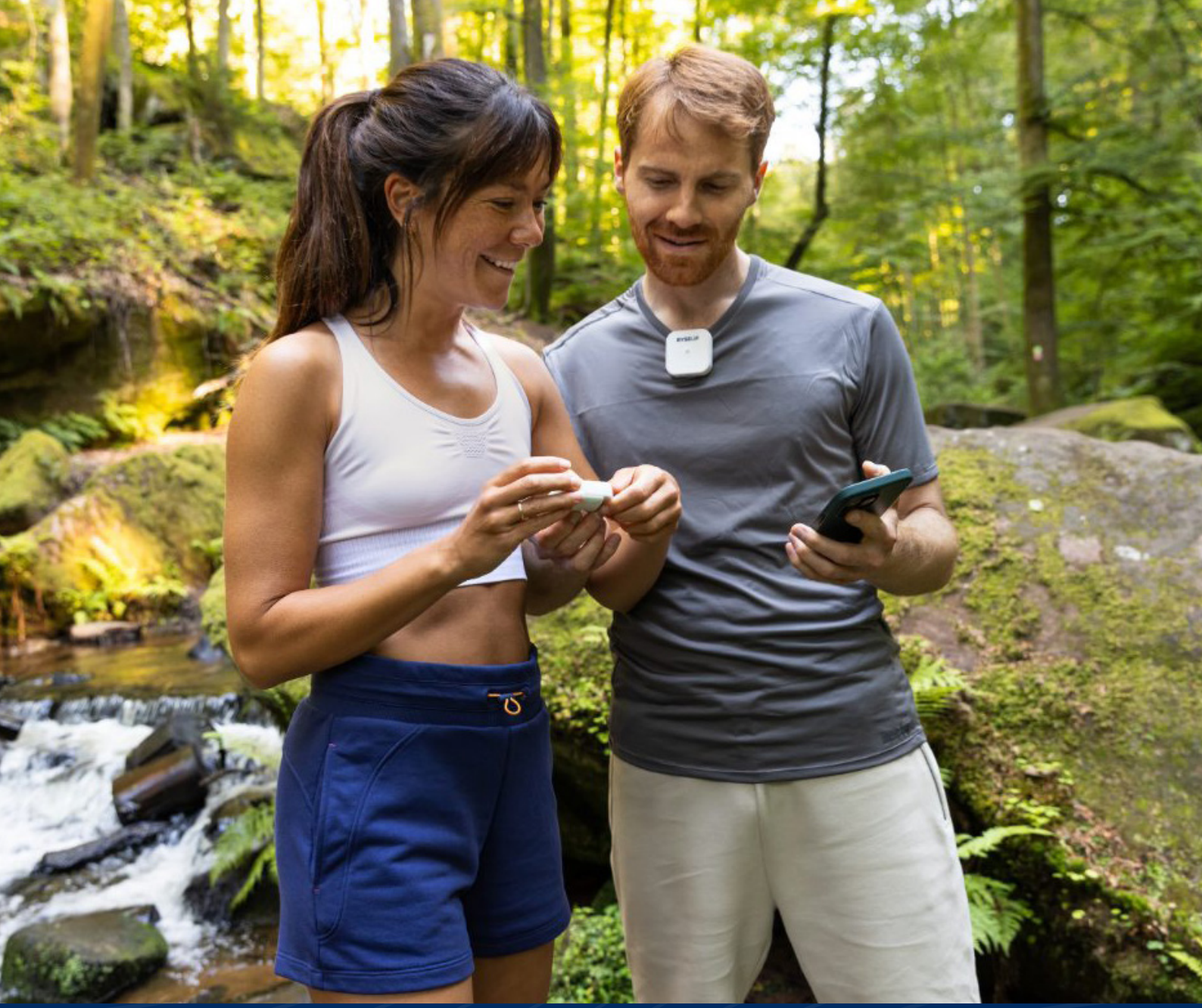

Başlarken

Sorumluluk Reddi*

RyseUp cihazları ve programları, RyseUp tarafından geliştirilen ve tescil edilen bir teknoloji olan „PEMF+“ (Darbeli Elektromanyetik Alan artı aynı anda yayınlanan çoklu frekanslar) iletimi yaratır. RyseUp darbeleri elektromanyetik programları, gelişmekte olan „frekans bilimi“ alanının bir özelliği olarak çalışmaktadır. Frekans bilimi, Geleneksel Çin Tıbbı (TCM) ve homeodinamiklere ilişkin yeni anlayışımız tarafından uzun zamandır tanınmaktadır; bunun bir örneği de son zamanlarda yapılan „biyo-alan“ çalışmasıdır. Biyo-alan, ABD NIH (Ulusal Sağlık Enstitüleri) tarafından tüm canlı organizmalardan (insanlar, hayvanlar ve bitkiler) yayılan bir elektromanyetik alan olarak rapor edilmiştir. Gelişmekte olan bu çalışma alanı, canlı sistemlerin karmaşık homeo-dinamik ilişkisini anlamak için bilimsel bir temel sağlamayı amaçlamaktadır. Şu anda ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, insan biyo-alanına odaklanarak canlı organizmaların biyo-alanlarını araştıran 400'den fazla akademik makale yayınlamaktadır. RyseUp frekansları ve cihazları, biyo-alan ile rezonansa girdiklerinde RyseUp cihazları ve programları arasındaki etkileşimin düşük seviyeli bir enerjetik deneyimini sağlamak için sağlıklı yaşam cihazları ve programları olarak tasarlanmıştır. Birçok kişi RyseUp ile dinlenme ve rahatlamayı, meditasyonu ve diğer ılımlı enerjetik deneyimleri teşvik eden bir sağlıklı yaşam deneyiminden keyif almış olsa da, bu enerjetik alanının hala teorik olduğu ve doktorunuza veya diğer sağlıklı yaşam uygulayıcılarına danışmanın yerini almaması gerektiği vurgulanmalıdır. RyseUp cihazları hastalık, hastalık benzeri veya diğer tıbbi durumları teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek için tasarlanmamıştır. Bir doktorun veya başka bir sağlık uzmanının bakımı altındaysanız, RyseUp kullanmadan önce doktorunuza veya sağlık danışmanınıza danışmalısınız. RyseUp PEMF+ teknolojisini kullanırken herhangi bir kontrendikasyon bildirilmemiştir, ancak bu elektromanyetik bir cihaz olduğundan, metal implantı olan (manyetik olmayan titanyum dışında) veya kalp pili, implante edilebilir kardiyoverter defibrilatörü (ICD), koklear implantı, intratekal pompası, insülin pompası, omurilik stimülatörü veya benzer tıbbi cihazı olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Ayrıca, RyseUp cihazlarının hamile veya emziren kadınlar ya da 18 yaşın altındaki kişiler tarafından (ebeveyn izni ve/veya danışman doktorun izni dışında) kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. RyseUp cihazlarını ve programlarını kullanırken, maksimum etkinlik için sıvı alın. Tüm frekansların tüm insanlar için işe yaramadığını unutmayın. Vücudunuz sizin için neyin işe yaradığını söyleyecektir! RyseUp Giyilebilir Cihaz, tek bir bakır bobine sahip bir Darbeli Elektromanyetik Alan (PEMF) dalga yayıcıdır. Sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek ve sürdürmek için tasarlanan RyseUp Wearable, sinüzoidal tek veya seri elektromanyetik frekans yansıtan tescilli PEMF + teknolojisi ile odaklanmıştır. Bir sağlık destek cihazı olarak RyseUp Wearable, Geleneksel Çin Tıbbı (TCM) felsefeleri ve uygulamaları ile uyumludur ve bir hastalığı veya hastalık benzeri bir durumu teşhis etme, iyileştirme, hafifletme, önleme veya tedavi etme amacı taşımaz. Bir hastalığa yakalanan RyseUp Giyilebilir Cihaz müşterilerinin tıbbi veya diğer sağlık uzmanlarına başvurmaları tavsiye edilir.

* Aşağıdaki ifadeler Gıda ve İlaç İdaresi tarafından değerlendirilmemiştir. Bu ürün herhangi bir hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek için tasarlanmamıştır.

Dizin

1. İndir	5
2. Kutudan Çıkarma	6
3. Hesap Oluştur	7
4. Kayıt (QR Kodu)	8
5. Kayıt (Manuel)	9
6. Programlar	10
7. Abonelik	11
8. Destek	12

İletişim



Üretici firma

RyseUp Sales B.V.
Faas Eliaslaan 13
3742 AR Baarn | The Netherlands

İletişim: info@ryseup.com

1. İndir

1. AppStore veya Google Play Store'da **RyseUp** için arama yapın.
2. **İndir**'i seçin.
3. QR kodunu tarayabilmek ve uygulama ile giyilebilir cihaz arasında bağlantı kurabilmek için indirme sırasında kamera ve konum **izinlerini** verdiğinizden emin olun.

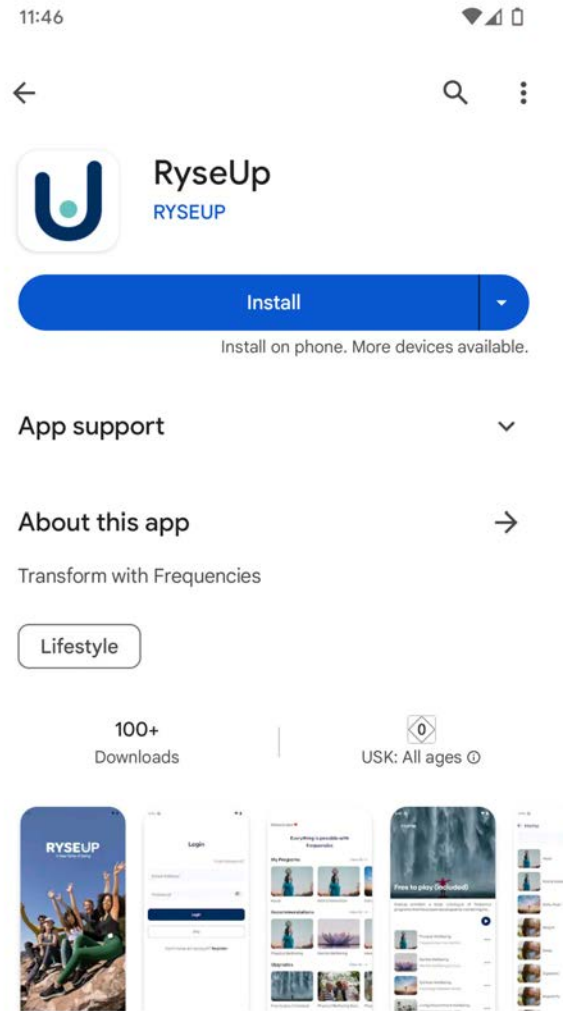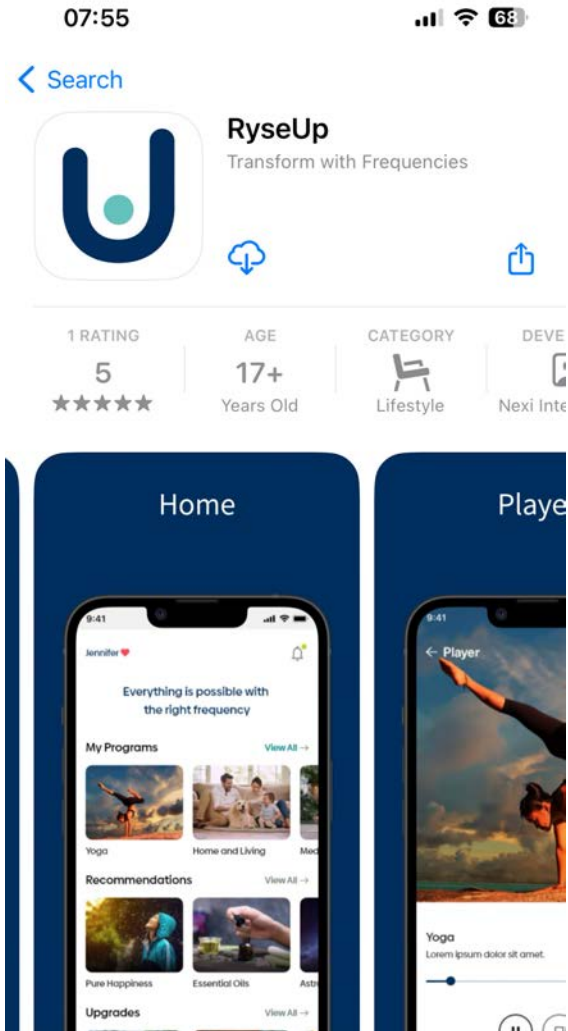

2. Kutudan Çıkarma

1. Kutuyu açın, **RyseUp Wearable'ı** ve şarj kablosunu çıkarın.
2. Başlangıç web sitesine erişmek için broşürdeki QR kodunu tarayın.
3. Güç düğmesini 2 saniye basılı tutarak Giyilebilir Cihazı açın.



3. Hesap Oluřtur

1. Adınızı, e-posta adresinizi girin ve büyük harf, küçük harf, rakam ve sembol-lerden en az birer tane olmak üzere en az 12 karakterden oluşan bir řifre oluřturun.
2. İleri'ye tıklayın ve size gönderdiğimiz e-posta ile hesabınızı onaylayın.

12:11 85%

Hesap oluřtur

Yardima mı ihtiyacınız var?

Harf ve rakam içermelidir


Sonraki

Atla

Zaten hesabınız var mı? **Giriř yap**


4. kayıt olun (QR kodu)

1. QR Kodu ile Kayıt Ol'a tıklayın.
2. Giyilebilir Cihazın arkasındaki QR Kodunu tarayın.

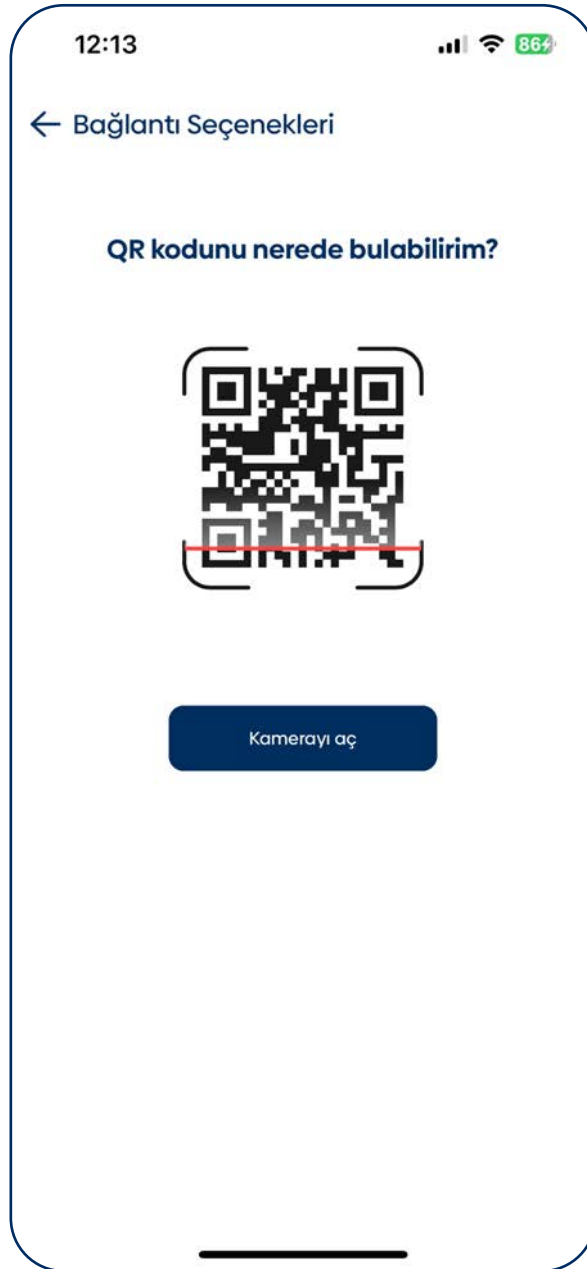

5. Kayıt (Manuel)


1. Manuel olarak bağlan'a tıklayın.
2. Wearable arkasındaki seri numarasını girin.

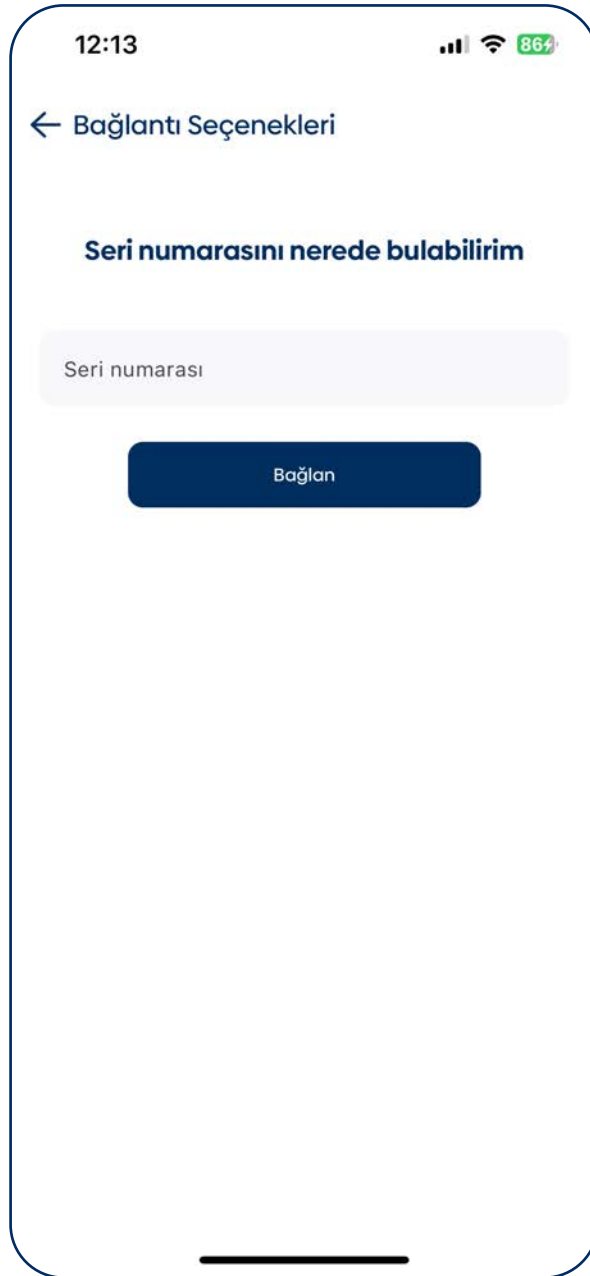

The screenshot shows a mobile application interface for manual connection. At the top, the status bar displays the time 12:13, signal strength, Wi-Fi, and 86% battery. Below the status bar, there is a back arrow and the text "Bağlantı Seçenekleri". The main heading is "Seri numarasını nerede bulabilirim". Below this, there is a text input field labeled "Seri numarası". At the bottom of the form is a dark blue button labeled "Bağlan".


6. Programlar

1. Çalıştırmak istediğiniz **programı** seçin.
2. **Şimdi Oynat'a** Tıklayın.

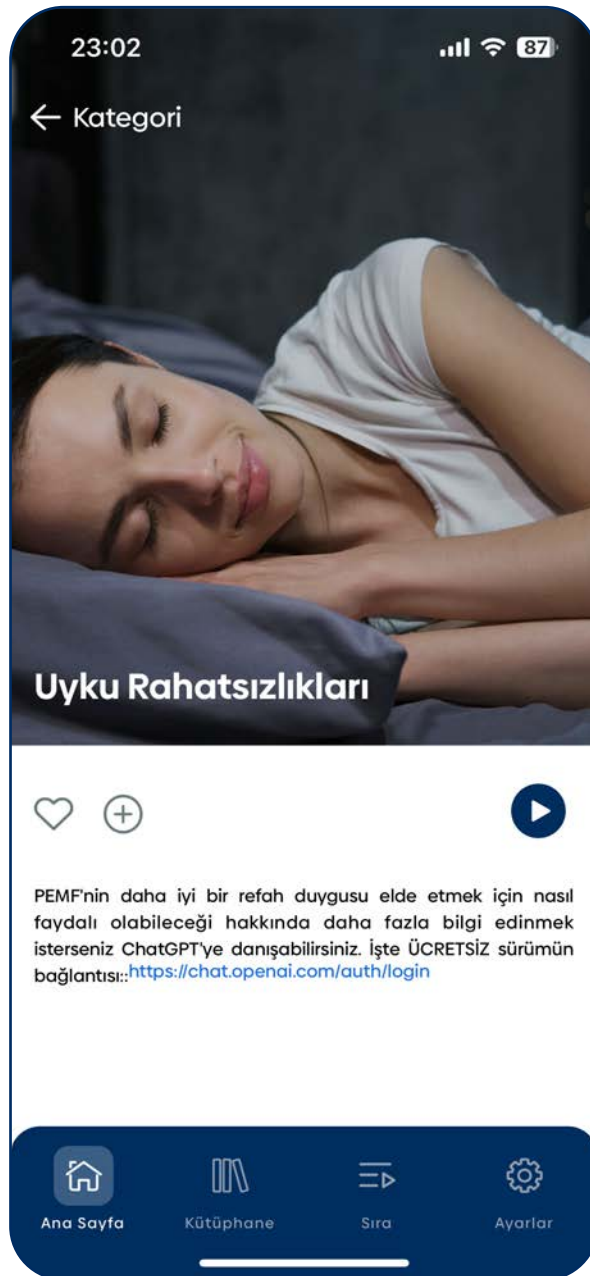

7. Abonelikler

1. RyseUp U-Store'a eriřmek için Abone Ol'a tıklayın.
2. RyseUp Uygulaması giriř bilgilerinizle RyseUp U-Store'a giriř yapın.
3. İstediginiz seenekleri sein.

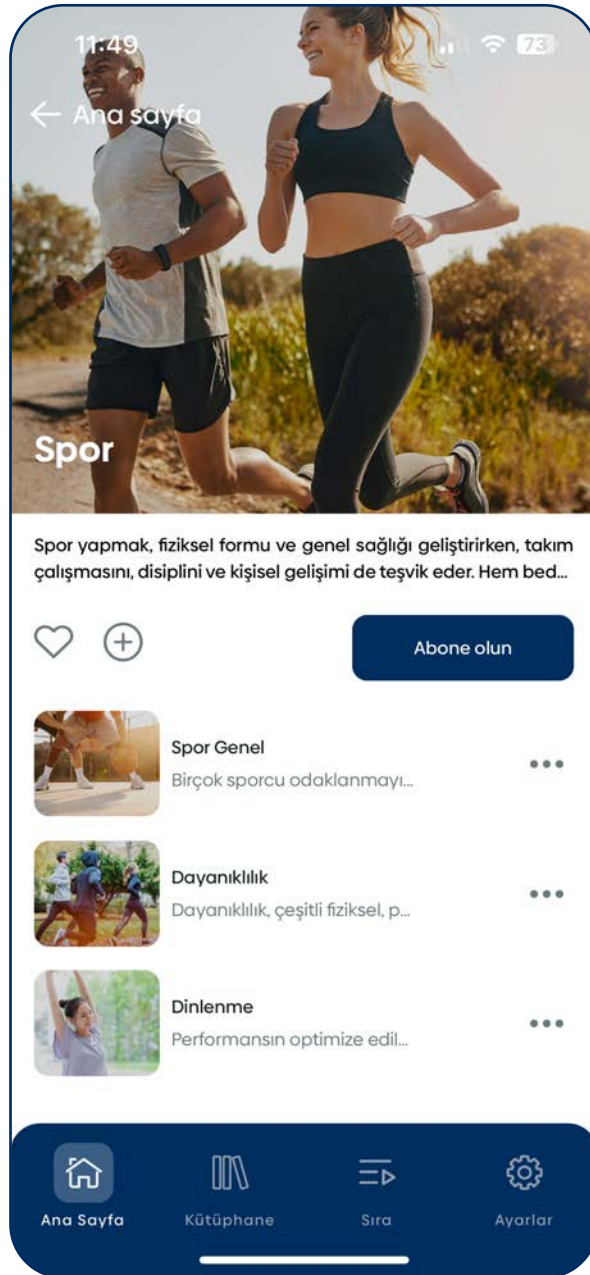

8. Destek

1. ryseup.com/tr/destek adresini ziyaret edin.
2. Ayrıca **+49 179 4225877** numaralı telefonda **WhatsApp** aracılığıyla bize ulaşın veya şu adresten bize e-posta gönderin **support@ryseup.com**





Yaşamı Kutlayın!



Kendi Kahramanın Ol.

RYSEUP

A New State of Being

Find us at ryseup.com