

RyseUp Wearable Kullanıcı Kılavuzu

RYSEUP
A New State of Being



Güven ile Dönüştürün.

Sorumluluk Reddi*

RyseUp cihazları ve programları, RyseUp tarafından geliştirilen ve tescil edilen bir teknoloji olan „PEMF+“ (Darbeli Elektromanyetik Alan artı aynı anda yayınlanan çoklu frekanslar) iletimi oluşturur. RyseUp darbeleri elektromanyetik programları, gelişmekte olan „frekans bilimi“ alanının bir özelliği olarak çalışmaktadır. Frekans bilimi, Geleneksel Çin Tıbbı (TCM) ve homeodinamiklere ilişkin yeni anlayışımız tarafından uzun zamandır tanınmaktadır; bunun bir örneği de son zamanlarda yapılan „biyo-alan“ çalışmasıdır. Biyo-alan, ABD NIH (Ulusal Sağlık Enstitüleri) tarafından tüm canlı organizmalardan (insanlar, hayvanlar ve bitkiler) yayılan bir elektromanyetik alan olarak rapor edilmiştir. Gelişmekte olan bu çalışma alanı, canlı sistemlerin karmaşık homeodinamik ilişkisini anlamak için bilimsel bir temel sağlamayı amaçlamaktadır. Şu anda ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, insan biyo-alanına odaklanarak canlı organizmaların biyo-alanlarını araştıran 400'den fazla akademik makale yayınlamaktadır. RyseUp frekansları, cihazları ve programları biyo-alan ile rezonansa girdiklerinde aralarındaki etkileşimin düşük seviyeli enerjetik deneyimini sağlamak için wellness cihazları ve programları olarak tasarlanmıştır. Birçok kişi RyseUp ile dinlenme ve rahatlama, meditasyon ve diğer ılımlı enerjik deneyimleri teşvik eden bir sağlıklı yaşam deneyiminden keyif almış olsa da, bu enerjetik alanının hala teorik olduğu ve doktorunuza veya diğer sağlıklı uzmanınıza danışmanın yerine geçmemesi gerektiği vurgulanmalıdır. RyseUp cihazları hastalık, hastalık benzeri diğer tıbbi durumları teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek için tasarlanmamıştır. Bir doktorun veya başka bir sağlık uzmanının bakımı altındaysanız, RyseUp kullanmadan önce doktorunuza veya sağlık uzmanınıza danışmalısınız. RyseUp PEMF+ teknolojisini kullanırken herhangi bir kontrendikasyon bildirilmemiştir, ancak bu elektromanyetik bir cihaz olduğundan, metal implantı olan (manyetik olmayan titanyum dışında) veya kalp pili, implante edilebilir kardiyoverter defibrilatörü (ICD), koklear implantı, intratekal pompası, insülin pompası, omurilik stimülatörü veya benzeri tıbbi cihazı olan herkes tarafından kullanılmamalıdır. Ayrıca, RyseUp cihazlarının hamile veya emziren kadınlar veya 18 yaşın altındaki kişiler (ebeveyn izni ve/veya danışman doktorun izni dışında) tarafından kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. RyseUp cihazlarını ve programlarını kullanırken, maksimum etkinlik için sıvı alın. RyseUp frekansları, her bir kullanıcı için aynı işe yaramadığını unutmayın. Vücudunuz sizin için hangi frekansın yararlı olduğunu size söyleyecektir.

RyseUp Wearable, tek bir bakır bobine sahip bir Darbeli Elektromanyetik Alan (PEMF) dalga yayıcıdır. Sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek ve sürdürmek için tasarlanan RyseUp Wearable, sinüzoidal (Motor sinir üzerine etkili düşük frekanslı akım) tek veya seri elektromanyetik frekans yansıtan tescilli PEMF + teknolojisi ile odaklanmıştır. Bir frekans destek cihazı olarak RyseUp Wearable, Geleneksel Çin Tıbbı (TCM) felsefeleri ve uygulamaları ile uyumludur ve bir hastalığı veya hastalık benzeri bir durumu teşhis etmek, iyileştirmek, hafifletmek, önlemek veya tedavi etmek için tasarlanmamıştır. Herhangi bir hastalık /rahatsızlığı olan RyseUp Wearable cihaz kullanıcılarının tıbbi veya diğer sağlık uzmanlarına danışması önerilir..

* Aşağıdaki ifadeler Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilmemiştir. Bu ürün herhangi bir hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek için tasarlanmamıştır.

Bu belgenin kapsamı

Kullanım ve kurulum talimatları:

Üretici firma:

RyseUp Sales B.V.
Faas Eliaslaan 13
3742 AR Baarn | The Netherlands

Türkiye'de İletişim:

RYSEUP TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
ÇINARLI MAH. OZAN ABAY CAD. EGEPERLA NO: 8 İÇ KAPI NO: Z17 KONAK / İZMİR

İletişim: info@ryseup.com

Bu Kullanım Kılavuzu, üretici RyseUp Sales B.V. tarafından oluşturulmuştur ve RyseUp yazılımının ve cihaz arayüzünün temel bilgilerini ve çalışmasını sağlar. Bu kılavuz herhangi bir şekilde tıbbi yorum veya tıbbi tavsiye SAĞLAMAZ. Bu kılavuz genel bilgi sağlar. Bu kılavuzda veya bağlantılı herhangi bir materyalde sağlanan bilgiler ve diğer içerikler, tıbbi tavsiye olarak tasarlanmamıştır ve bu şekilde yorumlanmamalıdır veya bu bilgiler profesyonel tıbbi uzmanlık veya tedavinin yerini tutmaz.

Bu kılavuzda veya RyseUp web sitesinde ifade edilen fikir ve görüşlerin herhangi bir akademik, hastane, sağlık uygulaması veya başka bir kurumla ilişkisi yoktur.

Not: Yaralanmaları önlemek için, kullanmadan önce RyseUp'in güvenlik bilgilerini okuyun.

Bu belgenin dağıtımı ve çoğaltılması ile içeriğinin kullanımı ve ifşası, açıkça izin verilmediği sürece yasaktır. Bu kullanım ve kurulum talimatları büyük bir özenle hazırlanmıştır.

Ancak gelecekte teknik değişikliklerin yapılabileceği veya ilgili içeriğin henüz uyarlanmadığı göz ardı edilemez. Güncellenmiş bir sürüm RyseUp Destek'ten talep edilebilir.

© 2024 RyseUp
Tüm hakları saklıdır.

İçerik

1. RyseUp Sistemi	6
2. Başlarken	7
3. Uygulama Programları	10
4. Genel Bakış ve Ayarlar	12
5. İpuçları ve Püf Noktaları	14
6. Destek	15

1. RyseUp Sistemi

RyseUp, daha yüksek yaşam kalitesine sahip olmak ve günlük aktivitelerinde enerjik olarak desteklenmek isteyenler içindir. Sizi ve kişisel ihtiyaçlarınızı destekleyebilecek bir RyseUp programı seçin. RyseUp, rahatlama daha iyi uyku, daha fazla yaratıcılık, daha iyi konsantrasyon, daha fazla odaklanma, yoga veya spor sırasında veya bir müzik aleti çalmayı öğrenirken size destek olacaktır.

RyseUp'ın faydaları kablolar veya aplikatörlerle sınırlı olmadığından, aileler, ekipler veya gruplar için mükemmel şekilde uygundur. Yoga dersleri sırasında daha fazla odaklanmaya katkıda bulunabilecek, evinizde rahatlatıcı bir atmosfer yaratabilecek veya ofiste odaklanmayı güçlendirebilecek programları tercih edin. Deneyimlerimiz, türlerine bakılmaksızın hayvanların da RyseUp'ın uyumlu frekanslar alanından yararlanabileceğini göstermiştir.

Refahınızın kontrolünü elinize alın.



2. Başlarken

Wearable cihazınızı ilk kez kullanmadan önce, ürünle birlikte verilen şarj kablosuyla şarj edin. Şarj sırasında kırmızı LED ışığı yanar (bkz. resim 1). Şarj işlemi tamamlandığında kırmızı LED söner ve Wearable cihazını kullanıma hazır hale gelir.

RyseUp Wearable'ı çalıştırmak için RyseUp uygulamasını Appstore veya Google Play Store'dan indirin.

RyseUp uygulamasını ilk açtığınızda tercih ettiğiniz dili seçmeniz istenir. Daha sonra, bir RyseUp kullanıcı hesabı oluşturmak için kimlik bilgilerinizi girin (bkz. resim 2) ve size gönderdiğimiz onay e-postası aracılığıyla e-posta adresinizi onaylayın.




Create Account

Help??

First Name

Last Name

Email Address

Password 

Must include letters and numbers

Next

Skip

Already have an account? [Login](#)

- 1 Wearable cihazı kullanmadan önce, ürünle birlikte verilen şarj kablosuyla tamamen şarj edin. Şarj sırasında kırmızı LED yanar. Wearable cihaz tamamen şarj olduğunda kırmızı LED söner.

- 2 Bir RyseUp kullanıcı hesabı oluşturmak için kimlik bilgilerinizi girin. Şifre, büyük ve küçük harflerin yanı sıra sayılar ve semboller içeren en az 12 karakter içermelidir. Uygulama içeriğini işlevlerini kullanmadan önizlemek için bu adımı atlayabilirsiniz.


2. Başlarken

Hesabınızı oluşturduktan sonra, oturum açın ve RyseUp Wearable'i cihazınıza (telefon, tablet, laptop vs) bağlayın. Wearable seri numarasını manuel olarak girmeyi ya da QR Kodunu taramayı seçebilirsiniz. Her ikisini de RyseUp cihazın arka tarafında bulabilirsiniz.



Şimdi güç düğmesini 2 saniye basılı tutarak RyseUp cihazınızı açın. LED halka yeşile dönecek ve Bluetooth simgesi mavi olacaktır. Bluetooth simgesi yanıp sönüyorsa, RyseUp cihazı henüz bağlı değildir. Bu durumda uygulamanın ayarlar bölümüne gidin ve bağlantıyı manuel olarak „RyseUp Bağlantısı“ butonunu açın. Uygulamanız ve Wearable cihazınız bağlı ve RyseUp frekans programlarını kullanmaya hazırsınız.

Bir programı etkinleştirdiğinizde, programın çalışması için seçtiğiniz dakika sayısı tamamlanana kadar LED halka YEŞİL'den MAVİ'ye döner.

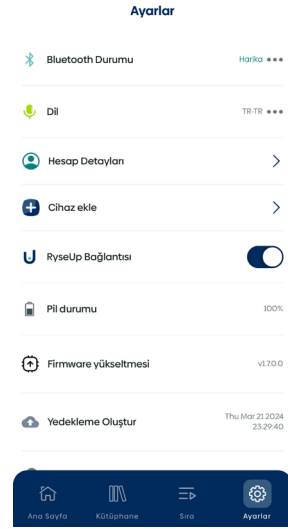



RyseUp Programları

3. Uygulama Programları

Bir Program Seçmek


Bu bölümde RyseUp frekans kataloğunu inceleyeceğiz ve programları nasıl çalıştıracığımızı, favorileri nasıl kaydedeceğimizi, oynatma listeleri oluşturmayı ve oynatma sırası oluşturmayı öğreneceğiz.

Ana Ekrandan, „Koleksiyonlar“ bölümünde bulabileceğiniz RyseUp frekans kataloğunun tamamına erişebilirsiniz. Alternatif olarak, üstteki arama çubuğu aracılığıyla satın aldığınız veya abone olduğunuz tüm Programlarda Arama yapabilirsiniz. RyseUp Uygulaması frekans kataloğunu üç seviyede düzenler: Koleksiyonlar, Kategoriler ve Programlar. Bunlardan herhangi birini çalabilir, kaydedebilir veya ekleyebilirsiniz.

Tüm bir Koleksiyonu, Kategoriyi veya tek bir programı oynatmak için Programı seçin ve „Şimdi Oynat“ düğmesine basın.

Programları Sık Kullanılanlara Ekleme

Favorilerinize bir ‚Koleksiyon‘, ‚Kategori‘ veya ‚Program‘ eklemek için kalp simgesine tıklamanız yeterlidir ve seçiminiz kaydedilir. Topladığınız favorileri uygulamanın Kütüphane bölümünde bulabilirsiniz.

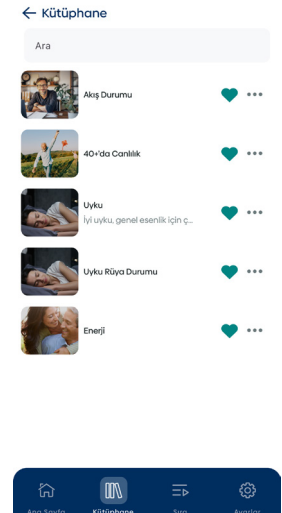

3. Uygulama Programları

Program Listeleri Oluşturma

Bir Oynatma Listesi Oluşturma, Kategori veya Program ekleyebilirsiniz. Bunun için Ana Menüden eklemek istediğiniz programı seçip "+" sembolüne tıklamanız ve "Oynatma Listesine Ekle"yi seçmeniz yeterlidir.



Yeni bir oynatma listesi oluşturmak veya mevcut birden fazla oynatma listesine eklemek arasında seçim yapabilirsiniz. Yeni bir program listesi oluşturmak için, ona bir isim verin, kısa bir açıklama ekleyin (isteğe bağlı) ve ileride kolayca bulmak için bir renk seçin. "Bitti" düğmesine tıkladıktan sonra yeni program listenizi seçebilirsiniz.

Tipki Favorileriniz gibi, Program Listeleriniz de uygulamanın Kütüphane bölümünde bulunabilir. Bir program listesini görüntülerken, mevcut programları kaldırabilir veya tüm program listesini favorilerinize ekleyebilirsiniz.

Oynatma Sırasına Program Ekleme

Oynatma sırası, bir kez oynatılacak özel bir program listesi oluşturmanızı sağlar. Bir oynatma sırasına Programlar, Kategoriler ve hatta tüm Koleksiyonları ekleyebilirsiniz. Bir şey eklemek için "+" sembolüne tıklayın ve "Oynatma Sırasına Ekle"yi seçin. Oynatma sırası, eklediğiniz her şeyi eklediğiniz sırada içerir. Seçiminizde değişiklik yapmak isterseniz, bir programın yanındaki noktalarla basarak öğeleri oynatma sırasından kaldırabilirsiniz.

Hazır olduğunuzda seçiminizin oynatma uzunluğunu seçin. Frekansları çalıştırmak için gereken minimum süre, selektörü sola doğru hareket ettirilerek seçilebilir. Sağa doğru hareket ettirerek 720 dakikaya kadar herhangi bir süre seçebilirsiniz, bu da çalıştırılan frekansların daha fazla tekrarlanmasıyla sonuçlanır.

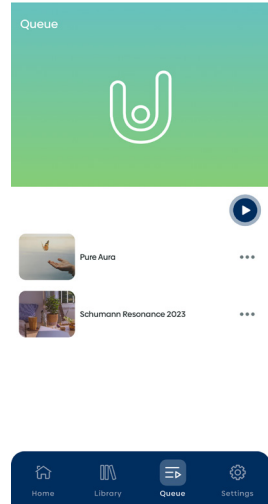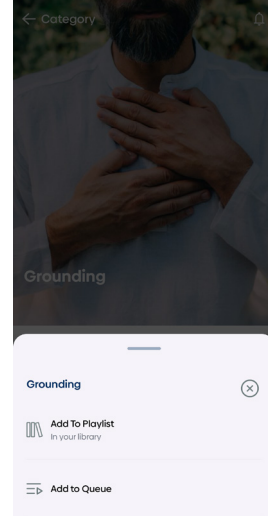




4. Genel Bakış ve Ayarlar

Süreyi onayladıktan sonra, RyseUp programlarınız artık çalışmaya başlar.. Oynatma sırasında şu anda neyin çalıştığını ve sırada neyin olduğunu görürsünüz. Halihazırda alınan / çalıştırılan programlar kütüphanenin „Son Çalınanlar“ bölümünde bulunabilir. Oynatma sırasını durdurmak veya başka bir program, oynatma listesi başlatmak ya da yeni bir oynatma sırası oluşturmak isterseniz, lütfen “Durdur” düğmesine tıklayın ve onaylayın.

O anda çalışmakta olan program her zaman ana ekrandaki mini oynatıcıda bulunabilir. Mini oynatıcıya tıkladığınızda, duraklatabileceğiniz, durdurabileceğiniz veya bir sonraki programa atlayabileceğiniz (başlatmak için bir Kategori veya Koleksiyon seçtiyseniz) oynatıcı penceresini açarsınız. Herhangi bir seçimin oynatma süresi tamamlandığında, uygulama ana Ekranı tekrar görüntüleyecektir.

Ayarlar görünümünde Bluetooth bağlantısının kalitesini kontrol edebilir, cihazınızı manuel olarak bağlayabilir ve bağlantısını kesebilir veya dil seçeneğini değiştirebilirsiniz. Ayrıca Wearable cihazın pil durumunu da görebilirsiniz. Pil %30 şarjın altına düştüğünde giyilebilir cihazın üzerindeki LED halka kırmızıya döner. Şarj olurken cihaz kullanmaya devam edebilirsiniz.

Yazılımı güncellemesi yapılması gerekiyorsa, WiFi ağınızın adını ve WiFi şifresini girmeniz istenecektir. Cihaz daha sonra yazılım güncellemesini indirmek ve yüklemek için WiFi ağınız üzerinden doğrudan RyseUp sunucusuna bağlanacaktır. Güncelleme sırasında cihazı vücudunuzdan çıkarın ve en az 50 cm / 20 inç mesafede tutun.

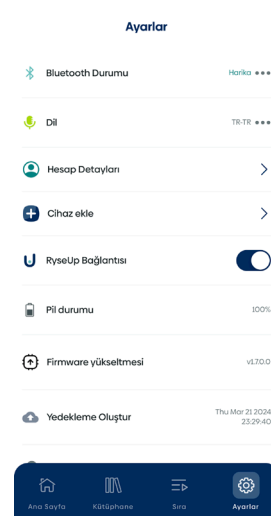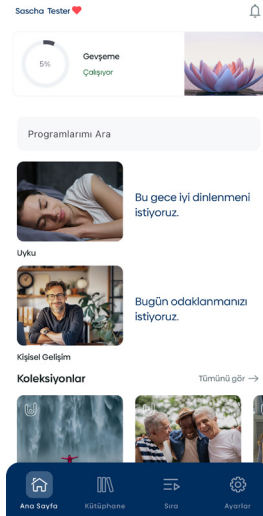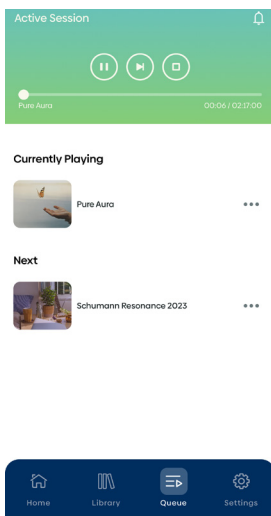



Ek Bilgi

5. İpuçları & Püf Noktaları

İpucu 1: RyseUp Wearable cihaz, seçilen programlar aktarıldıktan sonra uygulamadan bağımsız olarak çalışabilir. Ne kadar çok program seçerseniz veya bir oynatma sırası ya da oynatma listesi ne kadar uzun olursa, gerekli tüm bilgilerin Wearable cihaza aktarılması o kadar uzun sürebilir. Miktarla bağlı olarak aktarım 120 saniyeye kadar sürebilir.

Veriler aktarıldıktan sonra uygulamayı kapatabilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı kesildiğinde, uygulama mevcut çalışma süresini ve çalışan RyseUp programlarının durumunu göstermez. Bir durum güncellemesi almak için, giyilebilir cihazı Ayarlar menüsünden uygulamaya yeniden bağlamanız yeterlidir.

Otomatik kesintiler aşağıdakiler nedeniyle meydana gelebilir:

- Bluetooth sinyallerinin mesafe boyunca veya malzemelerin içinden zayıflaması.
- Duvar veya mobilya gibi fiziksel engeller.
- Diğer cihazlardan kaynaklanan parazitler.
- Bluetooth sürüm uyumluluğu.
- Radyo frekansları veya stadyumlar gibi kalabalık alanlarda yüksek kablosuz aktivite gibi çevresel faktörler.
- Düşük pil seviyesi.

İpucu 2: PEMF, Rezonans, TCM, Biofield, programlar veya diğer akademik programlar hakkında başka sorularınız varsa çalışmalarını için ChatGPT'ye danışmak isteyebilirsiniz.

İşte ÜCRETSİZ sürüme bir bağlantı: <https://chat.openai.com/auth/login>.

Ancak ChatGPT tarafından sağlanan tüm bilgilerin bilimsel olarak geçerli olmadığını ve zaman zaman çok konuşulan Yapay Zeka aracının halüsinasyonlar gördüğünü - icat ettiği gibi görünen bilgiler olduğunu unutmayın.

İpucu 3: RyseUp seansından önce ve sonra bir bardak saf su içmenizi tavsiye ederiz.

İpucu 4: RyseUp, bazı cep telefonları ve tabletler için cihazın otomatik olarak bağlantısının kesilmesine neden olabilen Bluetooth Düşük Enerji (BLE) teknolojisi ile çalışır. Seçilen RyseUp programları yine de çalışmaya devam edecektir. Uygulamayı açtığınızda, „Ayarlar“ ekranında Bluetooth bağlantısını manuel olarak yeniden bağlamanız istenebilir. Bunu yaptıktan sonra RyseUp uygulaması mevcut program seçiminizin durumunu güncelleyecektir. Bu işlem birkaç saniye sürebilir.

İpucu 5: RyseUp Giyilebilir Cihaz sınırlı ölçüde su geçirmezdir. Bu nedenle RyseUp ile yüzmeyin veya dalmayın. RyseUp ile duş almak, duş fışkiyesi' yukarıdan geldiğinde UCB konnektörü aşağı bakacak şekilde veya USB konnektörü duş fışkiyesinden korunacak şekilde 10 dakikaya kadar mümkündür. Duş fışkiyesinin doğrudan konnektör açıklığına bakmasını önleyin.

Certifications (USA):

Contains FCC ID: 2AC7Z-ESP32WROOM23E

Contains IC ID: 21098-ESPWROOM32E



Certifications (Europe):



6. Destek

Wearable cihazınız veya RyseUp uygulaması ile ilgili yardıma ihtiyacınız varsa ryseup.com/support adresini ziyaret edin. Ayrıca RyseUp Destek Ekibi ile **+49 179 4225877** numaralı telefondan Whatsapp aracılığıyla doğrudan iletişime geçebilirsiniz veya bize e-posta gönderebilirsiniz support@ryseup.com.

Ayrıca, ürünlerinizin ve PEMF+'ın teknik yönleriyle ilgili Sıkça Sorulan Sorular'ı destek bölümümüzde bulabilirsiniz.



Support

Welcome to RyseUp Support! Here you will find detailed information about support and service topics.

ChatBot

Allow us to introduce our RyseUp Chatbot. It's here to assist you when you need quick and targeted help.

Coming Soon

WhatsApp

For the fastest and direct access to our support, please contact us at the number:

+49 179 4225877





Şaşırmaya hazır mısınız?

NEŞEYİ SEÇ.

RYSEUP
A New State of Being

RYSEUP

A New State of Being

Bizi Őurada bulun ryseup.com